



SET DE SONDAS DE PENETRACION "MAGNESS-TAYLOR"

El SET de sondas "MAGNESS-TAYLOR" es adecuado para realizar pruebas de **perforación y penetración** por compresión en frutas, vegetales y otros productos alimentarios.

INFORMACION GENERAL

El SET de Sondas de Ensayo Magness-Taylor está compuesto por 4 Sondas en acero inoxidable:

- 1 Sonda cilíndrica con terminal de contacto plana de 7,94 mm (0.32 in) de Ø
- 1 Sonda cilíndrica con terminal de contacto plana de 11,11 mm (0.44 in) de Ø
- 1 Sonda cilíndrica con terminal de contacto semiesférica de 7,94 mm (0.32 in) de Ø
- 1 Sonda cilíndrica con terminal de contacto semiesférica de 11,11 mm (0.44 in) de Ø

El Texturómetro equipado con estas sondas, proporciona a los tecnólogos de alimentos una amplia gama de opciones de prueba de penetración más allá de los límites de las mediciones tradicionales de simple penetrometría de Magness-Taylor. Esta diversidad de aplicaciones lo ha hecho popular en muchas industrias más allá de las pruebas de productos frescos, como la confitería y los productos lácteos.


APLICACIONES

Este Set de sondas Magness-Taylor unidas a un Texturómetro se usa ampliamente en la evaluación de la textura de frutas y verduras, midiendo la **resistencia a la penetración**, que es un indicador clave de madurez.

Los resultados típicos son:

Máximo inicial	DUREZA DE LA PIEL
Fuerza Máxima	FIRMEZA

Máquina de Ensayos recomendada:

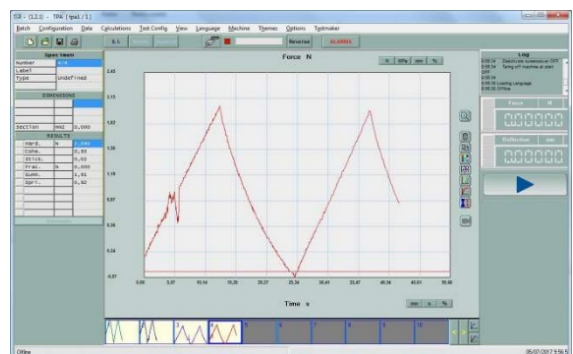

Software de Ensayos **MetroTEST**
(con Análisis Perfil Textura **TPA**)

